

MASKA KRTANIOWA

AIR-Q[®]3



Maska Krtaniowa Air-Q®3

Zaawansowana silikonowa maska Air-Q®3 pomaga zapewnić bezpieczeństwo i pewność podczas postępowania w obrębie dróg oddechowych, niezależnie od wyzwań. Wyjątkowa rampa rurki dotchawiczej i elewator nagłośniowy ułatwiają szybką, łatwą i bezpieczną intubację.



MASKA AIR-Q®3

Umożliwia wyjątkowo łatwe wprowadzanie rurki dotchawiczej, gdy wymagana jest nieoczekiwana intubacja.



MASKA AIR-Q®3G

Jest wyposażona w wyjątkowo szeroki port gastryczny, który mieści zgłębniki żołądkowe w rozmiarze do 18 Fr i dwa kanały gastryczne.



MASKA AIR-Q®SP3

Wykorzystuje wentylację dodatnim ciśnieniem w celu samodzielnego napełnienia maskietu. Ciśnienie w maskiecie cyklicznie się zmienia pomiędzy szczytowym ciśnieniem w drogach oddechowych a PEEP.



MASKA AIR-Q®SP3G

Wykorzystuje wentylację dodatnim ciśnieniem w celu samodzielnego napełnienia maskietu. Ciśnienie w maskiecie cyklicznie się zmienia pomiędzy szczytowym ciśnieniem w drogach oddechowych a PEEP. Jest wyposażona w samouszczelniający się maskiet z wyjątkowo szerokim portem gastrycznym, który mieści zgłębniki żołądkowe w rozmiarze do 18 Fr i dwa kanały gastryczne.

Idealne Założenie Maski Stało Się Łatwe

Maska krtaniowa
Air-Q®3 zapewnia:


- Anatomicznie prawidłowe umieszczenie rurki z maską krtaniową
- Uniesienie nagłośni w celu zmaksymalizowania dostępu
- Rampę prowadzącą ułatwiającą wprowadzanie i umieszczanie rurki dotchawiczej

Porównanie Masek Krtaniowych

Air-Q®3 z dźwignią nagłośni




Konkurencyjna ILA

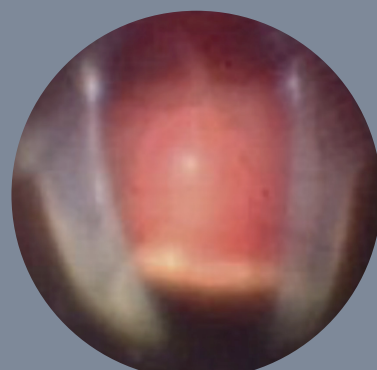

DŹWIGNIA NAGŁOŚNI

Nasza wyjątkowa maska krtaniowa do intubacji jest wyposażona w dźwignię nagłośni i podwyższony profil maski, aby zoptymalizować wprowadzanie maski i uszczelnianie dróg oddechowych.

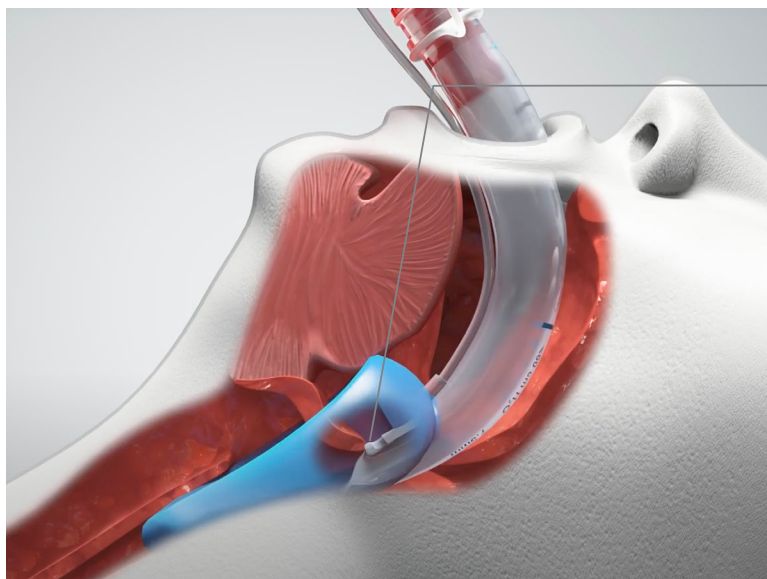

Wbudowany podwyższony profil maski poprawiający szczelność

Dźwignia nagłośni

Rampa rurki intubacyjnej ułatwia intubację i kieruje rurkę dotchawiczą do wlotu krtani

Kanały dostępu gastrycznego po obu stronach rurki maski krtaniowej



Air-Q®sp3G

Bardzo duży port gastryczny dostępny w maskach serii Air-Q®3G

JEDNORAZOWE MANDRYNY DO WPROWADZANIA RURKI ET

ELEMENT	ROZMIAR	ROZMIAR AIRQ3	MAKSYMALNY OETT	MASY CIAŁA	OPAK.
10-1006	00	0 - 1,5	4,5 mm	4 - 17 kg	10
10-1005	0	2 - 3	6,0 mm	17 - 60 kg	10
10-1004	1	4 - 5	9,0 mm	> 60 kg	10



MASKA KRTANIOWA AIR-Q®3 ZE ZŁĄCZEM 15 MM

ELEMENT	OPIS	ROZMIAR	IDEALNA WAGA PACJENTA	MAKSYMALNY OETT	OTWARCIE UST	DŁUGOŚĆ RURKI	MAKSYMALNY ZGŁĘBNIK	OBJĘTOŚĆ NAPEŁNIENIA
30005	Air-Q3	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6 cm	—	0–0,5 mL
30055	Air-Q3	0,5	2–4 kg	4,0 mm	8 mm	7 cm	—	0–0,5 mL
30105	Air-Q3	1	4–7 kg	4,5 mm	11 mm	9 cm	—	0,5–1,0 mL
30155	Air-Q3	1,5	7–17 kg	5,0 mm	14 mm	11 cm	—	1 mL
30205	Air-Q3	2	17–30 kg	5,5 mm	17 mm	14 cm	—	1 – 2 mL
30305	Air-Q3	3	30–60 kg	7,0 mm	20 mm	16 cm	—	2 – 3 mL
30405	Air-Q3	4	60–80 kg	8,0 mm	23 mm	18 cm	—	3 – 4 mL
30505	Air-Q3	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	20 cm	—	4 – 5 mL
50005	Air-Q3G	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6 cm	5 Fr	0 – 0,5 mL
50055	Air-Q3G	0,5	2 – 4 kg	4,0 mm	8 mm	7 cm	6 Fr	0 – 0,5 mL
50105	Air-Q3G	1	4–7 kg	4,5 mm	11 mm	9 cm	8 Fr	0,5–1,0 mL
50155	Air-Q3G	1,5	7–17 kg	5,0 mm	14 mm	11 cm	8 Fr	1 mL
50205	Air-Q3G	2	17–30 kg	5,5 mm	17 mm	14 cm	10 Fr	1 – 2 mL
50305	Air-Q3G	3	30–60 kg	7,0 mm	20 mm	16 cm	14 Fr	2 – 3 mL
50405	Air-Q3G	4	60–80 kg	8,0 mm	23 mm	18 cm	16 Fr	3 – 4 mL
50505	Air-Q3G	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	20 cm	18 Fr	4 – 5 mL
40005	Air-Qsp3	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6 cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0,5	2 – 4 kg	4,0 mm	8 mm	7 cm	—	—
40105	Air-Qsp3	1	4–7 kg	4,5 mm	11 mm	9 cm	—	—
40155	Air-Qsp3	1,5	7–17 kg	5,0 mm	14 mm	11 cm	—	—
40205	Air-Qsp3	2	17–30 kg	5,5 mm	17 mm	14 cm	—	—
40305	Air-Qsp3	3	30–60 kg	7,0 mm	20 mm	16 cm	—	—
40405	Air-Qsp3	4	60–80 kg	8,0 mm	23 mm	18 cm	—	—
40505	Air-Qsp3	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	20 cm	—	—
60005	Air-Qsp3G	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6 cm	5 Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0,5	2 – 4 kg	4,0 mm	8 mm	7 cm	6 Fr	—
60105	Air-Qsp3G	1	4–7 kg	4,5 mm	11 mm	9 cm	8 Fr	—
60155	Air-Qsp3G	1,5	7–17 kg	5,0 mm	14 mm	11 cm	8 Fr	—
60205	Air-Qsp3G	2	17–30 kg	5,5 mm	17 mm	14 cm	10 Fr	—
60305	Air-Qsp3G	3	30–60 kg	7,0 mm	20 mm	16 cm	14 Fr	—
60405	Air-Qsp3G	4	60–80 kg	8,0 mm	23 mm	18 cm	16 Fr	—
60505	Air-Qsp3G	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	20 cm	18 Fr	—

Przeznaczenie:

Maska krtaniowa air-Q SP 3/3G (z samoczynną regulacją ciśnienia) jest ulepszoną wersją standardowej maski krtaniowej air-Q. Stanowi zasadniczy przyrząd do udrażniania dróg oddechowych w sytuacji, gdy nie jest konieczne stosowanie doustnej rurki intubacyjnej (OETT). Może też wspomagać intubację w skomplikowanych stanach w obrębie dróg oddechowych.

Przestrogi/ostrzeżenia:

1. Przed użyciem sprawdzić wszystkie elementy maski air-Q SP 3/3G. Wyrzucić wadliwe elementy.
2. Przy masce air-Q SP 3/3G lub w jej pobliżu nie używać ostrych przyrządów.
3. Przed użyciem sprawdzić, czy rozmiar maski air-Q SP 3/3G odpowiada rozmiarowi złącza.
4. Złącze maski air-Q SP 3/3G jest wyjmowane, istnieje możliwość odłączenia maski. Podjąć standardowe środki ostrożności minimalizujące ryzyko odłączenia.
5. Przed użyciem sprawdzić prawidłowość zamocowania całego złącza w masce.
6. Złącze maski air-Q SP 3/3G jest wyjmowane, istnieje możliwość odłączenia maski. Podjąć standardowe środki ostrożności minimalizujące ryzyko odłączenia.
7. Podczas zakładania lub wyjmowania maski air-Q SP 3/3G nie używać nadmiernej siły.
8. Po założeniu natychmiast sprawdzić wentylację pacjenta.
9. W przypadku występowania i utrzymywania się problemów dotyczących wentylacji wyjąć maskę air-Q SP 3/3G i zapewnić skuteczną wentylację innymi metodami. Awaryjne środki zapewniające wentylację powinny być gotowe do użycia.
10. Złącza maski air-Q SP 3/3G mogą wysunąć się po nasmarowaniu. Przed ponownym użyciem dokładnie wyczyścić rurkę oddechową i złącze alkoholem.
11. Urządzenia oddechowe nadkrtaniowe, w tym maska air-Q SP 3/3G, nie chronią pacjenta całkowicie przed zachłyśnięciem.
12. Po zmianie pozycji głowy i karku pacjenta ponownie sprawdzić położenie urządzenia oddechowego i jego drożność.
13. Urządzenia oddechowe nadkrtaniowe są potencjalnie łatwopalne w obecności laserów i żegadła elektrycznego.
14. Podczas korzystania z maski air-Q SP 3/3G zaleca się stosowanie ustnika.
15. Ponowne używanie sprzętu przeznaczonego do jednorazowego użytku może doprowadzić do usterki mechanicznej oraz potencjalnego skażenia mikrobiologicznego. Jednorazową maskę air-Q SP 3/3G wyrzucić po użyciu. **NIE UŻYWAĆ PONOWNIE.**
16. Jednorazowa maska air-Q SP 3/3G jest sterylizowana przy użyciu tlenu etylenu, znanego czynnika rakotwórczego.