

Opatrunki Suresite® Select

Do zabezpieczania cewników i komfortu pacjenta



**Ochrona, na
którą możesz
liczyć**

Utrzymuj cewniki na miejscu

Sterylnie opatrunki Suresite® Select poprawiają komfort pacjenta i ułatwiają pracę opiekuna. Opatrunki tworzą szczelną barierę, mocno utrzymują cewnik na miejscu i zapobiegają przedostawaniu się szkodliwych mikroorganizmów do miejsca wkłucia. Wyjątkowo szerokie przezroczyste okienko Suresite ułatwia monitorowanie pod kątem oznak infekcji.

Innowacyjne kleje

bezpiecznie utrzymują
opatrunek na miejscu
i odprowadzają wilgoć

Przezroczysta folia

zapewnia oddychającą,
sterylną barierę dla
zewnętrznych
zanieczyszczeń

Ramka


zapewnia dokładną,
łatwą aplikację i
delikatne usuwanie

Szerokie okno podglądu

ułatwia monitorowanie pod
kątem oznak infekcji

Wycięcie w kształcie koniczyny

łatwo dopasowuje się do otoczenia oraz
do piast i lumenów

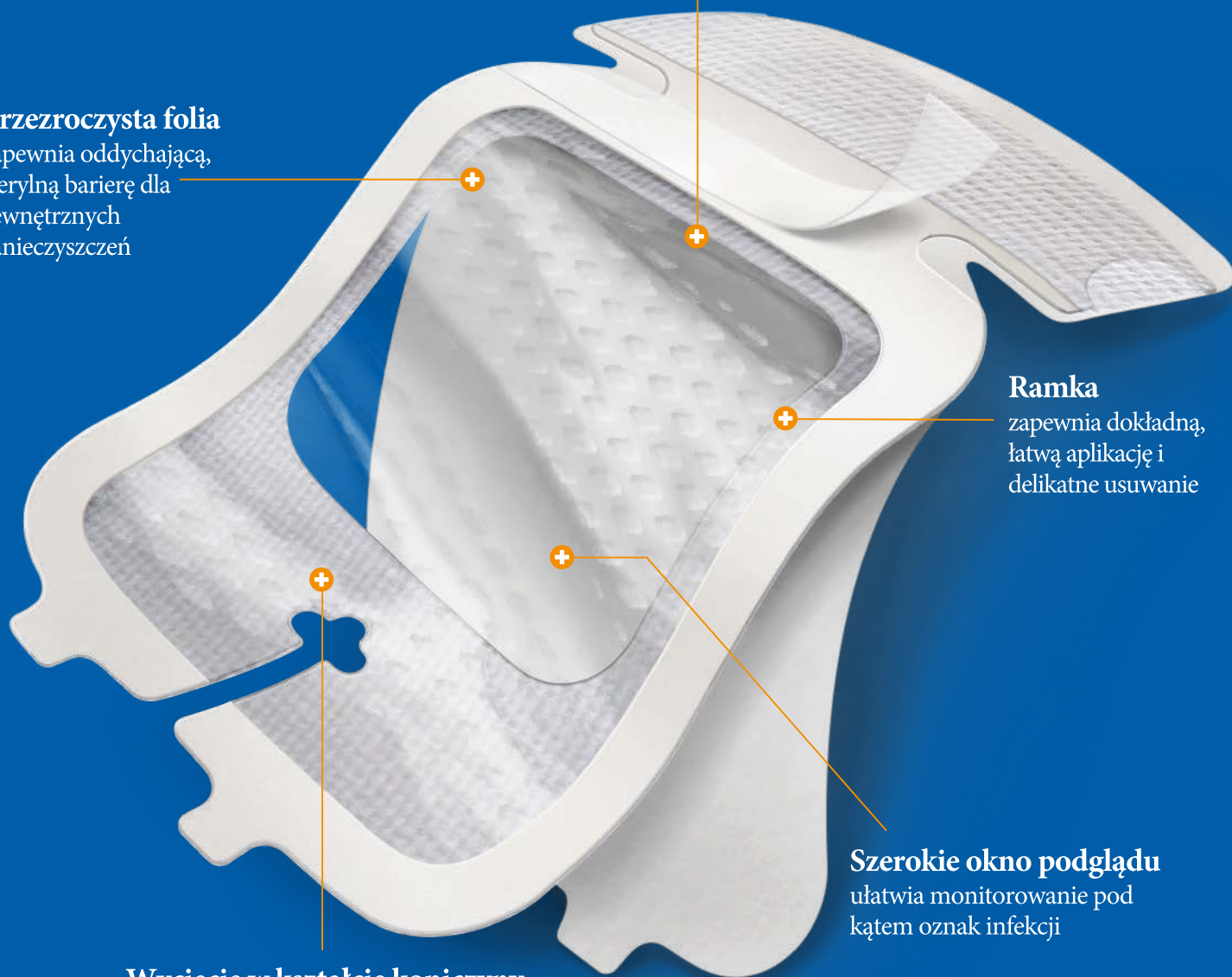

Sposób aplikacji

1. Usunąć papier zabezpieczający z opatrunku, aby odsłonić warstwę klejącą



VAD1683-INT 7 x 7.3 cm

2. Umieścić krawędź opatrunku z wcięciem na nasadkę cewnika



3. Oderwij ramkę otaczającą krawędź obramowania opatrunku



4. Nałóż taśmę zabezpieczającą na wycięcie



VAD1685-INT 8.9 x 11.4 cm



VAD1688-INT 10.2 x 11.4 cm



VAD1689-INT 10.2 x 15.5 cm



Jak usuwać opatrunek

1. Usun pasek taśmy zabezpieczającej z opatrunku



VAD1683-INT 7 x 7.3 cm

2. Delikatnie chwycić miękkie, płócienne krawędzie poniżej wycięcia, w kształcie koniczyny



3. Unieś powoli opatrunek z każdej strony



4. Odklejaj opatrunek zgodnie z kierunkiem wprowadzenia cewnika.



VAD1685-INT 8.9 x 11.4 cm



VAD1688-INT 10.2 x 11.4 cm



VAD1689-INT 10.2 x 15.5 cm



Bezpieczna ochrona wszędzie, gdzie tego potrzebujesz

Suresite® zapewnia trwałe i wygodne dopasowanie w każdym miejscu aplikacji.

- Krótkie cewniki żyłne obwodowe i pośredkowe
- Cewniki do żyły centralnej (CVC)
- Cewniki centralne wprowadzane obwodowo (PICC)
- Tunelowane CVC
- Wszczepione urządzenia infuzyjne
- Cewniki tętnicze
- Cewniki dializacyjne

Szczegóły produktu

Numer katalogowy	Rozmiar	Sposób pakowania
VAD1680-INT	4.4 x 3.8 cm	400/ karton; 100/ pudełko
VAD1682-INT	5.7 x 5.2 cm	400/ karton; 100/ pudełko
VAD1882-INT	7,1 x 8.9 cm	200/ karton; 50/ pudełko
VAD1683-INT	7 x 7.3 cm	400/ karton; 100/ pudełko
VAD1685-INT	8.9 x 11.4 cm	200/ karton; 50/ pudełko
VAD1688-INT	10.2 x 11.4 cm	200/ karton; 50/ pudełko
VAD1689-INT	10.2 x 15.5 cm	100/ karton; 25/ pudełko



Przewidziane zastosowanie

Opatrunki do zabezpieczania cewników, wyrób medyczny klasy I przeznaczony do użytku przez pracowników opieki medycznej. Przed użyciem zapoznaj się instrukcjami i środkami ostrożności na etykiecie.



Dystrybutor w Polsce:
Skamex S.A.
93-121 Łódź Częstochowska 38/52
T: +48426771411
F: +48426724010
www.skamex.com.pl
info@skamex.com.pl



Medline Industries Ltd
3rd Floor
Quayside Wilderspool Business Park
Greenalls Avenue
Warrington WA4 6HL
United Kingdom
Tel.: +44 844 334 5237
Fax: +44 844 334 5238
uk.medline.eu
uk-customerservice@medline.com

ŚLEDŹ NAS  



Suresite® Select Dressings are class I sterile medical devices intended to be used by healthcare professionals. Before use, consult instructions and precautions on the corresponding labelling.

 Centurion Medical Products Corporation
100 Centurion Way
Williamston, MI 48895, USA



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI, the Netherlands)

We reserve the right to correct errors that may occur in this brochure.

© 2021 Medline is a registered trademark of Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1045_EN 06/2021.

KRV-30.05.2023-wersja nr 1