



# BD™ Tępa Igła do Pobierania BD™ Tępa Igła z Filtrem

Aby bezpiecznie przygotowywać i podawać leki



## Bezpieczeństwo


BD™ Tępa Igła do Pobierania oraz BD™ Tępa Igła z Filtrem wymagają 10x większej siły penetracji podczas wkłucia niż tradycyjna ostra igła i dlatego redukują ryzyko zakłucia igłą.<sup>1</sup>

## Ograniczone ryzyko wycinania korka gumowego

Tępa, szlifowana końcówka igły, podczas penetracji korka fiołki centralnie pod kątem 90°, może znacząco pomóc ograniczyć ryzyko wycinania korka gumowego przed iniekcją.

## Ograniczone ryzyko zanieczyszczenia leku

BD™ Tępa Igła z Filtrem posiada wbudowany w nasadkę filtr 5µm, który ma zapobiegać aspiracji drobin szkła ze szklanych ampułek, z których leki pobierane są do strzykawki przed iniekcją.

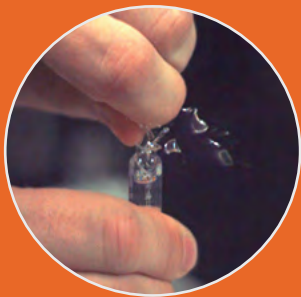

## Skuteczność

Igła o rozmiarze 18G umożliwia szybki przepływ i aspirację bez ryzyka wycinania korka gumowego, a dzięki temu, że jest dłuższa, może penetrować bariery zarówno w postaci pojedynczej, jak i podwójnej przegrody.

## Łatwość użycia

BD™ Tępa Igła do Pobierania oraz BD™ Tępa Igła z Filtrem zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować zmianę techniki przy pobieraniu.

<sup>1</sup> Haywood, Regina, RN, MSA; Karpf, Angela, MD: Eliminating unnecessary conventional sharps during medication preparation: The BD™ Blunt Fill Needle, BD 5/02 – 0476

## Bezpieczeństwo

Obie igły, BD™ Tępa Igła do Pobierania oraz BD™ Tępa Igła z Filtrem, uzupełniają pełną linię produktów BD, promujących eliminację przypadkowych zakłuczeń igłą w placówkach opieki zdrowotnej.

Do fiolek zawierających pojedyncze i wielokrotne dawki BD™ Tępa Igła do Pobierania



kod produktu 303129, 18G x 1 1/2"



kod produktu 305181, 18G x 1"

BD™ Tępa Igła do Pobierania oraz BD™ Igła z Filtrem należą do pełnego zakresu produktów bezpiecznych BD, łączących w sobie koncentrację na bezpieczeństwie z niezawodnością kliniczną, by działać na korzyść zarówno pacjentów, jak i pracowników opieki zdrowotnej.



Końcówka igły jest tępa, ścięta pod kątem 45° i wypolerowana elektrycznie w celu uzyskania gładkości.



Do ampułek BD™ Tępa Igła z Filtrem kod produktu 305211, 18G x 1 1/2"

BD™ Tępa Igła do Pobierania oraz BD™ Tępa Igła z Filtrem mogą zastąpić standardowe igły iniekcyjne przy pobieraniu leków z fiolek i w ten sposób mogą ograniczyć ryzyko zakłucia igłą.



ul. Częstochowska 38/52  
93-121 Łódź  
tel.: +48 42 677 14 11  
www.skamex.com.pl



ul. Osmańska 14  
02-823 Warszawa  
tel. 22 377 11 00  
www.bd.com/pl